




Traitement des dispositifs médicaux (DM)

Traitement des DM en fonction du niveau du risque

TYPE D'ACTE	RISQUE INFECTIEUX	DISPOSITIF MEDICAL	TRAITEMENT RECOMMANDE
Pénétration dans tissus ou cavités stériles ou au niveau du système vasculaire (curette, fraises, instruments endodontiques)	Haut	Critique	Usage unique ou stérilisation
Contact avec les muqueuses (miroir, précelle, porte amalgame)	Intermédiaire	Semi-critique	Stérilisation Si thermosensible : laveur-désinfecteur ou désinfection de niveau intermédiaire
Sans contact ou contact peau saine (embout lampe photopolymérisée)	Bas	Non critique	Désinfection de bas niveau

Traitement des DM en fonction du niveau du risque

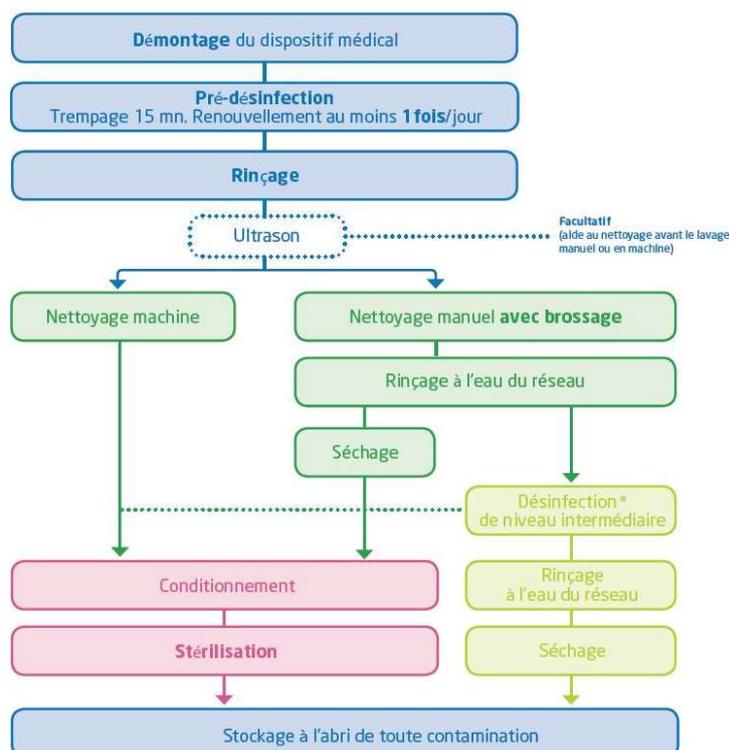

**La procédure de désinfection est très limitée dans le domaine de la chirurgie dentaire du fait de l'existence du matériel autoclavable ou à usage unique disponible. Tout instrument réutilisable thermorésistant doit être stérilisé.*